


CaseGuru Аллигатор М

Ручной портативный ирригатор

Руководство пользователя

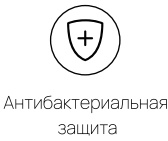

Антибактериальная защита



6 режимов очистки



Большой резервуар объёмом 240мл

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте и примите к сведению следующие меры предосторожности, чтобы безопасно и правильно использовать это устройство во избежание рисков или повреждений.

- Не разбирайте устройство и не меняйте его детали во избежание повреждения устройства, которое может привести к прекращению действия гарантии.
- Во избежание ожогов не используйте для чистки рта горячую воду температурой выше 50 °C.
- Если зарядный кабель или вилка блока питания повреждены, пожалуйста, замените их перед использованием.
- Не подвергайте устройство воздействию огня или нагрева, не заряжайте, не используйте и не оставляйте его при высокой температуре.


ВНИМАНИЕ

- Не используйте это устройство для каких-либо других целей, кроме чистки полости рта.
- Не прижимайте насадку сильно к деснам и зубам, чтобы не поранить их.
- Не погружайте устройство в воду на длительное время, чтобы избежать неправильной работы или возможного возгорания, поражения электрическим током и других опасностей.
- Не повреждайте, не портите и не видоизменяйте кабель питания. Не растягивайте, не сгибайте и не перекручивайте его. Не давите на кабель питания тяжелыми предметами и не зажимайте его между предметами, а также держите устройство и кабель вдали от нагретых предметов.
- Не храните устройство в местах с жарким или влажным воздухом и избегайте попадания прямых солнечных лучей.
- Не заряжайте устройство в жарких или влажных местах, таких как ванная комната.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, пожалуйста, выньте вилку из розетки и зарядный штекер во избежание возгорания или других опасностей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте устройство без насадки.
- Это устройство не предназначено для использования детьми без присмотра взрослых.
- Храните в недоступном для детей месте и не используйте в качестве игрушки.
- Если у вас есть заболевания десен или вы перенесли операцию на полости рта в течение последних 2 месяцев, пожалуйста, проконсультируйтесь со стоматологом перед использованием.
- Не добавляйте ополаскиватель для полости рта в резервуар для воды. Это вызовет коррозию и приведет к оплыванию резервуара с корпусом устройства, что может привести к нарушению процесса открытия резервуара для воды.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

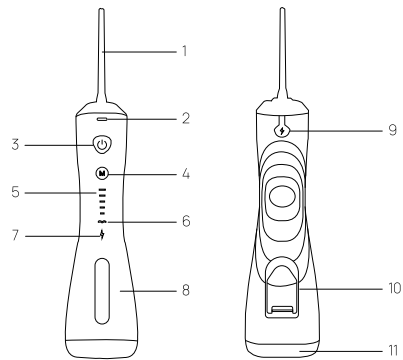

- Ирригатор для полости рта – 1 шт.
- Насадки – 4 шт.
- Кабель USB Type-C – 1 шт.
- Руководство пользователя
- Дорожная сумочка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Из-за того, что десны не привыкли к стимулирующему воздействию устройства, при первом использовании десны могут кровоточить (пожалуйста, сначала используйте бережный режим), кровоточивость прекратится через неделю. Если такая ситуация продолжается более двух недель, это может быть вызвано проблемами с деснами (пародонтит и т.д.). В этом случае, пожалуйста, прекратите использование устройства и проконсультируйтесь со своим стоматологом.

Зарядка аккумулятора ирригатора

- На задней части корпуса устройства найдите порт Type-C для зарядки аккумулятора ирригатора.
- Вставьте зарядный кабель в порт для зарядки Type-C, а другой стороной вставьте кабель в адаптер питания 5 В=1 А.
- Подключите адаптер питания к электросети.


Полная зарядка аккумулятора ирригатора составляет примерно 4 часа.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА


- Установите насадку и вставьте ее в отверстие до щелчка




- Откройте боковую крышку резервуара для воды и наполните его водой комнатной температуры

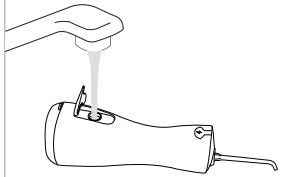

- С помощью кнопки выбора режима выберите подходящий режим

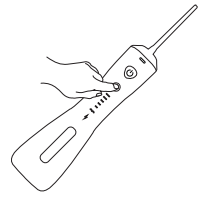


- Поместите насадку в полость рта и нажмите на кнопку включения ирригатора для начала его работы

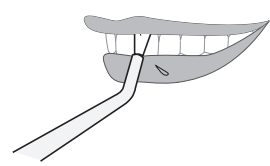

- После окончания использования ирригатора откройте нижнюю крышку резервуара для воды, промойте его и просушите (рекомендуется чистить резервуар каждые 20 дней)




- Способ открытия крышки резервуара для воды:
 - Нажмите на кнопки нижней крышки резервуара для воды
 - Потяните вверх крышку резервуара для воды

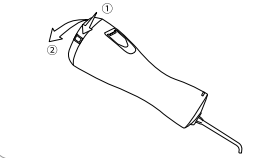

ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ

Режим	Назначение режима	Давление струи
Пульсирующий	Глубокая очистка и массаж десен	67-95 PSI
Чувствительный	Для чувствительных зубов и первого использования	40-60 PSI
Бережный	Мягкий массаж десен	60-80 PSI
Мягкий	Бережная очистка	80-100 PSI
Стандартный	Ежедневная очистка	100-120 PSI
Сильный	Глубокая очистка	120-140 PSI
Индикатор заряда аккумулятора	1. Уровень заряда аккумулятора менее 20% - индикатор горит красным цветом 2. Уровень заряда аккумулятора 20-80% - индикатор горит синим цветом 3. Уровень заряда аккумулятора более 80% - индикатор горит зеленым цветом 4. В процессе зарядки индикатор мигает красным цветом. 5. При полном заряде индикатор горит зеленым цветом	Интеллектуальный режим позволяет запоминать последний используемый режим при выключении и повторном включении устройства

ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

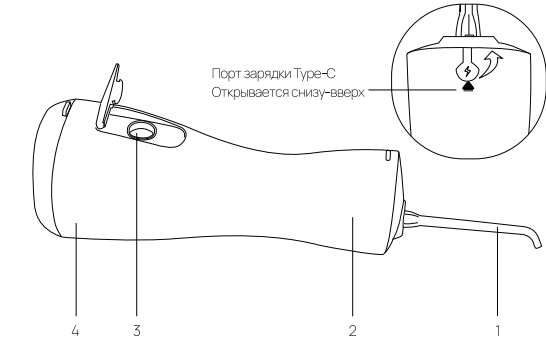

1. Насадка

Нажмите на кнопку для снятия насадки, снимите насадку, промойте ее водой и вытрите тряпочкой.
Рекомендуется менять насадку каждые 6 месяцев.
Если насадка повреждена в ходе эксплуатации, ее необходимо заменить.

2. Корпус устройства

- Очистите грязь с помощью ткани, смоченной мыльным раствором, а затем высушите сухой тканью.
- Если корпус изделия загрязнен, промойте его чистой водой.
- Не протирайте изделие растворителями, бензином, спиртом и другими веществами.
- Не используйте горячую воду с температурой выше 50 °C.
Пожалуйста, после очистки тщательно вытрите устройство до полного высыхания.

3. Разъем для залива воды

Разъем для залива воды необходимо регулярно чистить так же, как и корпус. При появлении загрязнений возможна протечка воды.

4. Резервуар для воды

- Откройте резервуар и регулярно очищайте его.
- Вымойте внутреннюю часть щеткой или другим способом и протрите сухой тряпкой.
Когда устройство не используется в течение длительного времени, пожалуйста, держите резервуар для воды сухим.

Гарантийный талон

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

- Ущерб, причиненный ремонтом неавторизованным специалистом
- Из-за внешних воздействий
- Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами
- В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название продукта	Ручной портативный ирригатор
Модель	CaseGuru Аллигатор М
Диаметр насадки	0,6 мм
Частота пульсации	1200-1600 / мин
Давление струи	40-140 PSI
Объем резервуара для воды	240 мл
Уровень шума	70 дБ
Питание	5 В - 1 А
Тип разъема	Type-C
Время полной зарядки аккумулятора	около 4 ч
Степень влагозащиты	IPX7
Количество режимов работы	6
Габариты	220 x 78 x 62 мм
Вес	282 г

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Решение
Не работает	Только что купленный ирригатор или ирригатор не использовался более 3-х месяцев	Пожалуйста, полностью зарядите аккумулятор. Время полной зарядки – 4 часа
Слабый напор воды при работе	Насадка ирригатора забита посторонними предметами	Замените насадку
Быстрый расход заряда аккумулятора	Срок работы аккумулятора истек Время зарядки аккумулятора меньше положенного	Свяжитесь с продавцом Зарядите аккумулятор в течение 4-х часов
Индикатор зарядки не загорается в процессе зарядки аккумулятора	Неправильно вставлен зарядный кабель Неисправна электросхема устройства	Вставьте зарядный кабель еще раз Пожалуйста, свяжитесь с продавцом