

CaseGuru Аллигатор S

Ручной карманный ирригатор с раздвижным контейнером для воды

Руководство пользователя



USB-зарядка
Долгий срок службы



3 режима для
комфортной очистки зубов



Насадки с возможностью
поворота на 360°

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте и примите к сведению следующие меры предосторожности, чтобы безопасно и правильно использовать это устройство во избежание рисков или повреждений:

- Не разбирайте устройство и не меняйте его детали во избежание повреждения устройства, которое может привести к прекращению действия гарантии.
- Во избежание ожогов не используйте для чистки рта горячую воду температурой выше 50 °C.
- Если зарядный кабель или вилка блока питания повреждены, пожалуйста, замените их перед использованием.
- Не подвергайте устройство воздействию огня или нагрева, не заряжайте, не используйте и не оставляйте его при высокой температуре.


ВНИМАНИЕ

- Не используйте это устройство для каких-либо других целей, кроме чистки полости рта.
- Не прижимайте насадку сильно к деснам и зубам, чтобы не повредить их.
- Не погружайте устройство в воду на длительное время, чтобы избежать неправильной работы или возможного возгорания, поражения электрическим током и других опасностей.
- Не повреждайте, не портите и не видоизменяйте кабель питания. Не растягивайте, не сгибайте и не перекручивайте его. Не давите на кабель питания тяжелыми предметами и не зажимайте его между предметами, а также держите устройство и кабель вдали от нагретых предметов.
- Не храните устройство в местах с жарким или влажным воздухом и избегайте попадания прямых солнечных лучей.
- Не заряжайте устройство в жарких или влажных местах, таких как ванная комната.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, пожалуйста, выньте вилку из розетки и зарядный штекер во избежание возгорания или других опасностей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте устройство без насадки.
- Это устройство не предназначено для использования детьми без присмотра взрослых.
- Храните в недоступном для детей месте и не используйте в качестве игрушки.
- Если у вас есть заболевания десен или вы перенесли операцию на полости рта в течение последних 2 месяцев, пожалуйста, проконсультируйтесь со стоматологом перед использованием.
- Не добавляйте ополаскиватель для полости рта в резервуар для воды. Это вызовет коррозию и приведет к склеиванию резервуара с корпусом устройства, что может привести к нарушению процесса открытия резервуара для воды.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

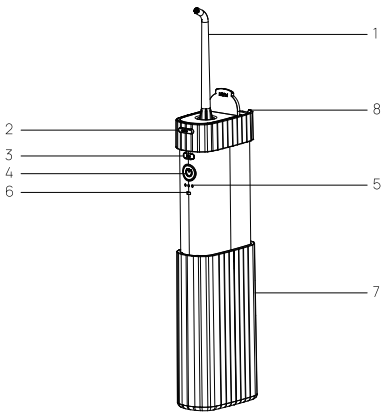

- 1 – Насадка
2 – Кнопка для снятия насадки
3 – Порт зарядки Type-C
4 – Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ и выбора режима
5 – Индикация режимов
6 – Индикатор заряда аккумулятора
7 – Резервуар для воды
8 – Разъем для заливки воды и хранения насадки

Комплектация:

- Ирригатор для полости рта – 1 шт.
- Насадки – 4 шт.
- Кабель USB Type-C – 1 шт.
- Руководство пользователя
- Дорожная сумочка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Из-за того, что десны не привыкли к стимулирующему воздействию устройства, при первом использовании десны могут кровоточить (пожалуйста, сначала используйте бережный режим), кровоточивость прекратится через неделю. Если такая ситуация продолжается более двух недель, это может быть вызвано проблемами с деснами (пародонтит и т.д.). В этом случае, пожалуйста, прекратите использование устройства и проконсультируйтесь со своим стоматологом.

Зарядка аккумулятора ирригатора

- На задней части корпуса устройства найдите порт Type-C для зарядки аккумулятора ирригатора.
- Вставьте зарядный кабель в порт для зарядки Type-C, а другой стороной вставьте кабель в адаптер питания 5 В=1 А.
- Подключите адаптер питания к электросети.

Полная зарядка аккумулятора ирригатора составляет примерно 4 часа.

Гарантийный талон

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

- Ущерб, причиненный ремонтом неавторизованным специалистом
- Из-за внешних воздействий
- Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами
- В случае повреждения из-за контакта с жидкостью


Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА


1. Установите насадку



2. Потяните резервуар для воды вниз до упора. Убедитесь, что он выдвинут до конца во избежание подтеков жидкости. Откройте крышку резервуара, чтобы заполнить его водой

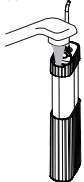

3. Поместите насадку в полость рта и нажмите кнопку включения. Держите рот закрытым во избежание разбрызгивания воды

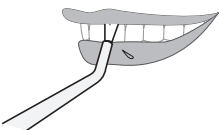


4. Для включения/выключения ирригатора нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ коротким нажатием, чтобы изменить режим, удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в течение 0,5 секунды



5. Хранение после использования: снимите насадку, откройте крышку резервуара для воды и уберите насадку на хранение




6. Регулярная очистка: отсоедините резервуар для воды и очистите его

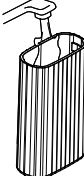

ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ

Режим	Выбор режима	Цвет индикации режима	Назначение режима	Давление струи
Бережный	Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы начать пользоваться режимом	Зеленый	Слабый напор воды. Бережная очистка. Подходит для чувствительных зубов и первого использования	40-60 PSI
Пульсирующий	Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и удерживайте ее в течение 5 сек, чтобы переключиться в пульсирующий режим	Синий	Пульсирующее давление с переменной частотой чередует сильный и бережный режимы, что позволяет глубоко очищать и массировать десны	60-110 PSI
Сильный	Перейдите в пульсирующий режим, затем нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и удерживайте ее в течение 5 сек, чтобы переключиться в сильный режим	Белый	Сильный напор воды, эффективная очистка, соответствует ежедневным потребностям большинства людей	120-140 PSI
Индикатор заряда аккумулятора	1. При отсутствии питания индикатор загорается красным. 2. Во время зарядки индикатор мигает красным. 3. При полной зарядке индикатор становится зеленым.			

ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

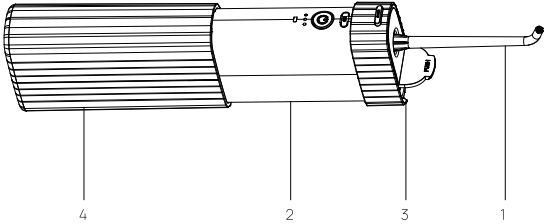

1. Насадка

- Нажмите на кнопку, предназначенную для снятия насадки, и снимите ее.
- Промойте насадку водой, а затем вытрите насухо салфеткой.
- Стоматологи рекомендуют менять насадку каждые 6 месяцев.
- Если верхняя часть насадки деформирована, замените ее на новую, чтобы избежать неисправностей.

2. Корпус устройства

- Очистите грязь с помощью ткани, смоченной мыльным раствором, а затем высушите сухой тканью.
- Если корпус изделия загрязнен, промойте его чистой водой.
- Не протирайте изделие растворителями, бензином, спиртом и другими веществами.
- Не используйте горячую воду с температурой выше 50 °C.
- Пожалуйста, после очистки тщательно вытрите устройство до полного высыхания.

3. Разъем для заливки воды

Разъем для заливки воды необходимо регулярно чистить так же, как и корпус. При появлении загрязнений возможна протечка воды.

4. Резервуар для воды

- Откройте резервуар и регулярно очищайте его.
- Вымойте внутреннюю часть шейкой или другим способом и протрите сухой тряпкой.
- Когда устройство не используется в течение длительного времени, пожалуйста, держите резервуар для воды сухим.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название продукта	Ручной карманный ирригатор с раздвижным контейнером для воды	
Модель	CaseGuru Аллигатор S	
Диаметр насадки	0,6 мм	
Частота пульсации	1200-1600 / мин	
Давление струи	40-140 PSI	
Объем резервуара для воды	140 мл	
Емкость аккумулятора (питание)	1100 мАч	
Уровень шума	≤ 72 дБ	
Питание	5 В = 1 А	
Номинальная мощность	8 Вт	
Тип разъема	Type-C	
Время полной зарядки аккумулятора	около 4 ч	
Степень влагозащиты	IPX7	
Количество режимов работы	3	
Габариты	127 x 63 x 32 мм	
Вес	200 г	

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Решение
Не работает	Только что купленный ирригатор или ирригатор не использовался более 3-х месяцев	Пожалуйста, полностью зарядите аккумулятор. Время полной зарядки - 4 часа
Слабый напор воды при работе	Насадка ирригатора забита посторонними предметами	Замените насадку
Быстрый расход заряда аккумулятора	Срок работы аккумулятора истек Время зарядки аккумулятора меньше положенного	Свяжитесь с продавцом Зарядите аккумулятор в течение 4-х часов
Индикатор зарядки не загорается в процессе зарядки аккумулятора	Неправильно вставлен зарядный кабель Неисправна электросхема устройства	Вставьте зарядный кабель еще раз Пожалуйста, свяжитесь с продавцом