



CaseGuru Зубополис

Детская зубная щётка с таймером и мягкой щетиной для безопасной чистки

Руководство пользователя



3 режима работы



Уровень влагозащиты IPX7



Мягкие щетинки

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте и примите к сведению следующие меры предосторожности, чтобы безопасно и правильно использовать это устройство во избежание рисков или повреждений.


⚠ ВНИМАНИЕ

- Не погружайте и не помещайте зарядный кабель в воду или любую другую жидкость. Если вы обнаружили, что кабель упал в воду, немедленно выньте вилку питания из розетки. Не доставайте упавший в воду зарядный кабель. После того как зарядный кабель полностью высохнет, произведите повторное подключение устройства к сети.
- Не храните устройство в местах с жарким или влажным воздухом и избегайте попадания прямых солнечных лучей.
- Используйте только те насадки и зарядный кабель, которые идут в комплекте с устройством.
- Зубная щетка является предметом личной гигиены и не предназначена для использования в медицинских учреждениях или для использования несколькими лицами.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Убедитесь, что устройство используется в условиях, в которых напряжение питания соответствует напряжению, указанному на устройстве.
- Не разбирайте и не модифицируйте устройство или его части самостоятельно. Если устройство или его части повреждены, немедленно прекратите его использование и свяжитесь с нашей службой поддержки.
- Во избежание несчастных случаев, дети в возрасте от 3 до 8 лет, у которых наблюдаются нарушения двигательной активности рук, ментальные или сенсорные нарушения, недостаток необходимых знаний и умений, могут пользоваться зубной щеткой только под присмотром взрослого. Без соответствующего надзора детям не разрешается также чистить и обслуживать устройство.
- Если у вас есть заболевания десен или вы перенесли операцию на полости рта в течение последних 2 месяцев, пожалуйста, проконсультируйтесь со стоматологом перед использованием.
- Если зубная паста содержит перекись водорода, пищевую соду или бикарбонат, после ее использования тщательно промойте насадку зубной щетки водой.
- Не разрешается мыть зубную щетку и аксессуары к ней в посудомоечной машине.
- Не используйте это устройство для каких-либо других целей, кроме чистки зубов, десен и языка. Избегайте попадания на устройство косметических средств или юющих средств, так как они могут повредить поверхность зубной щетки.
- Регулярно очищайте вилку зарядного устройства от пыли и грязи, во избежание перегрева устройства или поражения электрическим током, которые могут быть вызваны нарушением проходимости тока.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, пожалуйста, выньте вилку и зарядный штекер из розетки во избежание возгорания или других опасностей.
- Во время первого использования зубной щетки могут наблюдаться повышенная чувствительность зубов и раздражение десен, что вызвано высокой частотой вибрации. Если такая ситуация продолжается более двух недель, пожалуйста, прекратите использование устройства и проконсультируйтесь со своим стоматологом.


ОБЗОР УСТРОЙСТВА

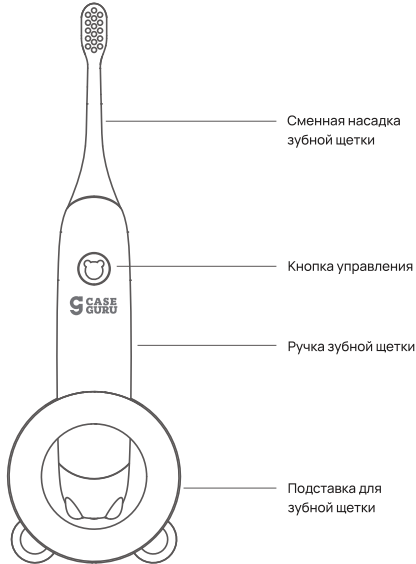

Комплектация:

- Электрическая звуковая зубная щетка – 1 шт.
- Сменные насадки – 2 шт.
- Кабель USB Type-C – 1 шт.
- Подставка для щетки – 1шт.
- Руководство пользователя

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

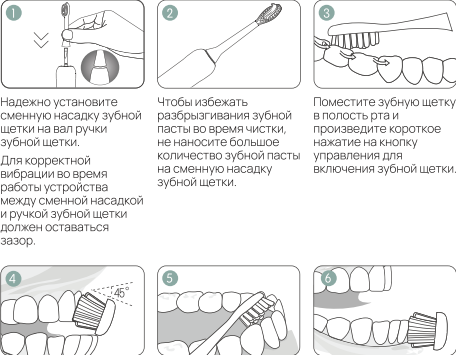

Установите зубную щетку так, чтобы угол между щетинками и деснами составлял 45°.

Очистите поверхность зубов медленными круговыми движениями, избегая сильных нажатий на зубную щетку.

По завершении чистки, ополосните полость рта водой.

Категории пользователей, которым необходимо обратиться за консультацией к врачу перед началом использования электрической зубной щетки:

- Пользователи с наличием заболеваний десен или перенесшие операцию полости рта в течение последних 2-х месяцев.
- Пользователи, имеющие симптомы заболеваний ротовой полости (кровоточивость десен и др.).
- Пользователи с повышенной чувствительностью полости рта.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Электрическая звуковая зубная щетка имеет 3 режима чистки:

- Деликатный режим. Подходит для чувствительных зубов.
- Стандартный режим. Подходит для более тщательной чистки зубов.
- Поллирующий режим. Подходит для удаления налета и бережного отбеливания

Переключение режимов

Переключение режимов происходит в следующей последовательности Деликатный – Стандартный – Поллирующий.

- Произведите короткое нажатие на кнопку управления для включения зубной щетки, после чего зубная щетка начнет работу в деликатном режиме чистки.
- Для смены режима чистки произведите повторное короткое нажатие на кнопку управления. После успешной смены режима чистки индикатор быстро мигает.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Проблема	Возможная причина	Решение
Снижение интенсивности вибрации	1. Слишком сильный нажим щеткой на зубы 2. Насадка установлена вплотную к ручке (нет зазора)	1. Уменьшите нажим щеткой на зубы 2. Снимите насадку и установите ее заново, сохраняя зазор между насадкой и ручкой
После зарядки устройство работает в течение короткого времени	1. Некорректное соединение зарядного устройства с портом зарядки зубной щетки 2. Недостаточное напряжение сети	1. Устройство недостаточно заряжено 2. Устройство не использовалось более 6 месяцев 3. Срок службы аккумулятора истек
Устройство не включается	1. Устройство не заряжено 2. Устройство сломано	1. Зарядите устройство 2. Обратитесь в сервис гарантийного обслуживания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название продукта	Детская зубная щётка с таймером и мягкой щетиной для безопасной чистки
Модель	CaseGuru Зубополис
Электрическая звуковая зубная щетка	
Номинальное напряжение	3,7 В
Номинальная мощность	1,2 Вт
Емкость батареи	400 мАч
Размер с насадкой	180x25 мм
Уровень влагозащиты	IPX7
Аккумулятор	Литий-ионный аккумулятор (Li-ion)
Время зарядки	2 часа
Возрастное ограничение	от 3 лет

Зарядное устройство	
Входное напряжение	5 В/1 А
Номинальная мощность	2,5 Вт

ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

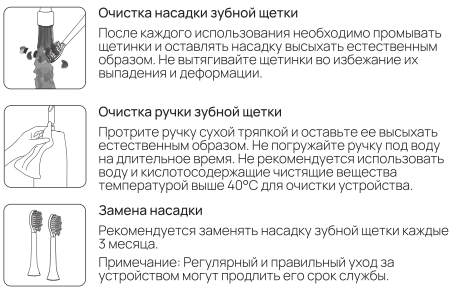

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- Перед первым применением включите устройство и проверьте уровень заряда. При необходимости зарядите зубную щетку до полного заряда аккумулятора.
- Если зубная щетка не использовалась в течение 6 месяцев, пожалуйста, зарядите ее до полного заряда аккумулятора.
- Если во время использования зубной щетки индикатор заряда батареи начинает мигать и зубная щетка издает повторяющиеся вибрации, значит заряд батареи подходит к концу, и требуется зарядить зубную щетку.
- Пожалуйста, вставьте кабель USB Type-C в порт для зарядки и убедитесь, что зарядное устройство подсоединено к сети.
- Мигающий индикатор зарядки устройства означает, что в данный момент зубная щетка заряжается. Когда устройство полностью зарядится, индикатор перестанет мигать.
- Если устройство долго не использовалось, то во время зарядки индикатор может не гореть. Пожалуйста, подождите 6-10 минут, после чего устройство должно вернуться в корректный режим индикации зарядки.
- В процессе зарядки ручка зубной щетки может слегка нагреваться – это нормально. Если ручка становится горячей, то немедленно отключите устройство от сети и обратитесь в сервис гарантийного обслуживания.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Пожалуйста, следите за индикатором заряда батареи во время использования устройства и своевременно заряжайте его, если оно разрядилось.
- Прежде чем снова использовать электрическую зубную щетку после длительного перерыва, пожалуйста, убедитесь, что она заряжена.

Отработанные аккумуляторы следует утилизировать только в специализированных организациях по обработке отходов, запрещается выбрасывать их по своей инициативе. Встроенный аккумулятор может содержать компоненты, вредные для окружающей среды.

Гарантийный талон

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

- Ущерб, причиненный ремонтом неавторизованным специалистом
- Из-за внешних воздействий
- Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами
- В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	